

The Ivoclar logo, featuring the word "ivoclar" in a dark blue, sans-serif font. The letter "i" is lowercase and has a small green dot above it. The background of the slide is a close-up photograph of a dental model showing a set of upper and lower teeth with red gum tissue. A hand is visible on the left side, holding the model. A dental instrument is visible on the right side, near the teeth.

ivoclar

Özet

Geleneksel Çıkarılabilir Protezler

Geleneksel yöntemlerle üretilen
yüksek kaliteli protezler için bireysel
çözümler.


Making People Smile

Entegre ve verimli

Analog mu, dijital mi? Seçim sizin. Size uygun olan yöntemi kullanın.

BPS®

öngörülebilir
sonuçlar için

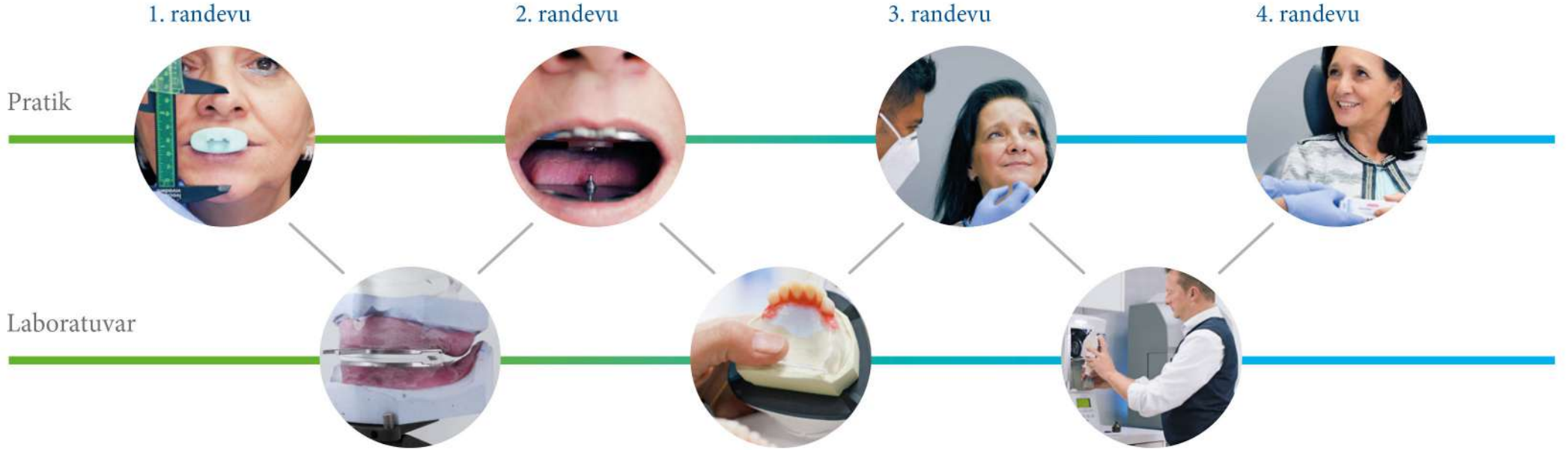

BPS: Protez üretimi için sistematik iş akışımız

Pratik ve laboratuvarında verimli, iyi organize edilmiş ve hedef odaklı adımlar.

Adımları biz belirliyoruz, siz süreci ve ürünleri seçiyorsunuz. İster analog, ister dijital, isterse de ikisinin birleşimi olsun, tercih ettiğiniz yöntemi izleyin. Tercihinize en uygun yöntemi siz seçin.

Bu broşürde, geleneksel protez yapım süreci için ürün yelpazemizdeki tüm gerekli ürünleri bulacaksınız.



Table of Contents

BPS® İş Akışı	4
Protez yapımında değerli yardımcıları	8
Centric Tray	10
SR Ivolen	11
Gnathometer M / UTS 3D	12
Stratos®	14
Hazır dişler	16
SR Phonares II	18
SR Vivodent® SPE / SDCL	20
SR Vivodent DCL	24
SR Vivodent	26
Ivostar®	27
Protez taban malzemeleri ve ötesi	28
IvoBase® System	30
ProBase® Hot & Cold	32
SR Triplex® Hot & Cold	33
SR Ivocap®	34
SR Nexco®	35
Önleme ve bakım	36
VivaDent®	36
Dijital protez üretimi	38
Ivotion® Denture System	38

Kurs ve ürün yelpazesi ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin veya sözleşmeli ortaklarımızla iletişime geçin.

Başarının anahtarı

Başarılı tedavi sonuçlarına ulaşmada iyi bir ekip çalışması şarttır ve koordineli adımlarla ve ürünlerle geliştirilebilir.



Diş hekimliği uygulamaları ve laboratuvarlar odaklanmış bir ekip olarak birlikte çalışırlar.



Entegre iş akışları ve ürünlerle verimli ve hassas üretim süreçleri elde edilir.



Protezlerin tamamlanması için daha az randevu gerektiğinden, hastalar memnun kalıyor.

Özelleştirilmiş
çözüm

Amacımız insanları tekrar gülümsetmek ve müşterilerimizin bunu başarmasını olabildiğince zahmetsiz hale getirmek istiyoruz. Hastaları etkili bir şekilde tedavi etmek için diş muayenehanesi ve laboratuvar arasında yakın işbirliği şarttır. Aynı derecede önemli olan ise bireysel hasta ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirilmiş çözümler oluşturmanıza olanak tanıyan kapsamlı bir ürün ve sistem yelpazesidir.

BPS®
Workflow

- Çıkarılabilir protez iş akışımız yıllardır güvenilen bir yöntemdir.
- ✓ Güvenilir, kişiselleştirilmiş, kanıtlanmış
 - ✓ Uygulamalar ve laboratuvarlar için
 - ✓ Analog ve dijital seçenekler

Ivoclar
Academy

- ✓ Dünya standartlarında profesyonel gelişim
- ✓ Uygulamalı atölye çalışmaları ve canlı web seminerleri: ivoclar.com/academy

Esneklik

- ✓ Birleştirilebilen iş akışları
- ✓ Analog ve dijital
- ✓ Hızlı, öngörülebilir süreçler

Protez yapımında değerli yol arkadaşları

Güvenilir, kişiselleştirilmiş ve verimli

İyi çalışan bir ekipte, ekip üyeleri tarafından kullanılan ürünlerin de etkili bir şekilde birlikte çalışması önemlidir. İşte burada devreye giriyoruz. Ürünlerimiz, hastanın bireysel verilerini diş muayenehanesinden laboratuvara doğru bir şekilde aktarmanıza yardımcı olur.

Uygulama için

- ✓ Centric Tray ölçü kağıdı
- ✓ UTS 3D transferbow
- ✓ Gnathometer M ağız içi kayıt cihazı

Laboratuvar için

- ✓ SR Ivolen tepsi malzemesi
- ✓ Stratos® articulators
- ✓ Modelin yönlendirilmesi için yatay kılavuz
- ✓ Verimli ve işlevsel diş yerleştirme için kurulum şablonu
- ✓ SR Nexco® protez restorasyonlarının kişiselleştirilmesi için

Daha az randevu [1]

“BPS iş akışı, daha hassas çalışmamızı sağlayarak diş hekimi müşterilerimizin zamandan tasarruf etmesine olanak tanır. Centric Tray ile yapılan ön ısırma ölçümü, hastanın ağız durumunu yakından yansıttığı için bu süreçte önemli bir rol oynar. Sonuç olarak, fonksiyonel ve estetik bir protez son derece ekonomik bir şekilde üretilebilir.”

Patrick Zimmermann, MDT / Dominik Mader, DT
İsviçre

[1] [1] Fonksiyonel izlenim alma ve ağız içi destek pimi kaydı tek randevuda.

Centric Tray

Bireysel ısırık kaydı

Centric Tray ile hastanın merkezi ve dikey çene ilişkileri ve bireysel oklüzal durumu hakkında ön kayıt tek bir kolay adımda alınabilir. BPS sisteminin önemli bir ürünüdür ve protez yapım sürecinin sonraki aşamalarının verimliliğini ve öngörülebilirliğini artırmaya yardımcı olur.

- ✓ Ön merkezli ilişkiyi kurmak için basit bir prosedür.
- ✓ Sonraki ayarlamalara duyulan ihtiyacı en aza indirir.
- ✓ Yeniden kullanılabilir
- ✓ Hem tam hem de kısmi protez uygulamalarında, geleneksel veya implant destekli



SR Ivolen

Kendiliğinden sertleşen tepsi malzemesi

SR Ivolen, kişiye özel ölçü kaşıklarının yapımında kullanılan iki bileşenli bir malzemedir. Uygun yapıştırıcı ile birlikte tüm diş ölçü malzemeleriyle kullanılabilir. Kısmen veya tamamen dişsiz hastaların tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- ✓ Uyarlaması ve tamamlaması kolay
- ✓ Yüksek uyum doğruluğu
- ✓ El tipi bir rulo kullanılarak düzgün kalınlıkta bir tabaka halinde açılabilir.
- ✓ Hazırlama süresi: yaklaşık 7 dakika



Gnathometer M / UTS 3D

Her hastanın ihtiyaçlarına göre bireysel olarak uyarlanabilir.

Kişiyi özel çözümler, diş hekimliği uygulaması ve laboratuvar arasındaki iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırmak için bireysel olarak ayarlanabilen ekipman gerektirir.

Gnathometer M ve UTS 3D, ağız içi destek pimi kaydının artikülatöre aktarılmasını sağlayarak kafatası ve çene eklemi ile ilgili bilgileri aktarır.

GnathometerM

Dişsiz hastalarda santral ilişkiyi ve nötr çene veya dinlenme pozisyonunu belirlemek zorlu bir iştir. Bu destek pimi kayıt cihazı bu görevde size yardımcı olur.


- ✓ Çene-çene ilişkilerinin kaydı
- ✓ Yüksekliği ayarlanabilir destek pimi
- ✓ Sterilize edilebilir / yeniden kullanılabilir
- ✓ Geçmeli mekanizmalı tescil plakaları
- ✓ Ağız içi Gotik kemer çizimi için uygundur.



UTS 3D

Transfer yayı ile oklüzal düzlemin kafatası ve temporomandibular ekleme ilişkili konumu kolayca ve hassas bir şekilde belirlenebilir.

- ✓ 3D kayıt eklemine bir tommy vidası ile sabitlemenin kolay işlemi.
- ✓ Karbon yan kolları sayesinde toplam ağırlık düşüktür.
- ✓ Kampçı düzlemine veya Frankfurt yatay düzlemine göre evrensel uygulama

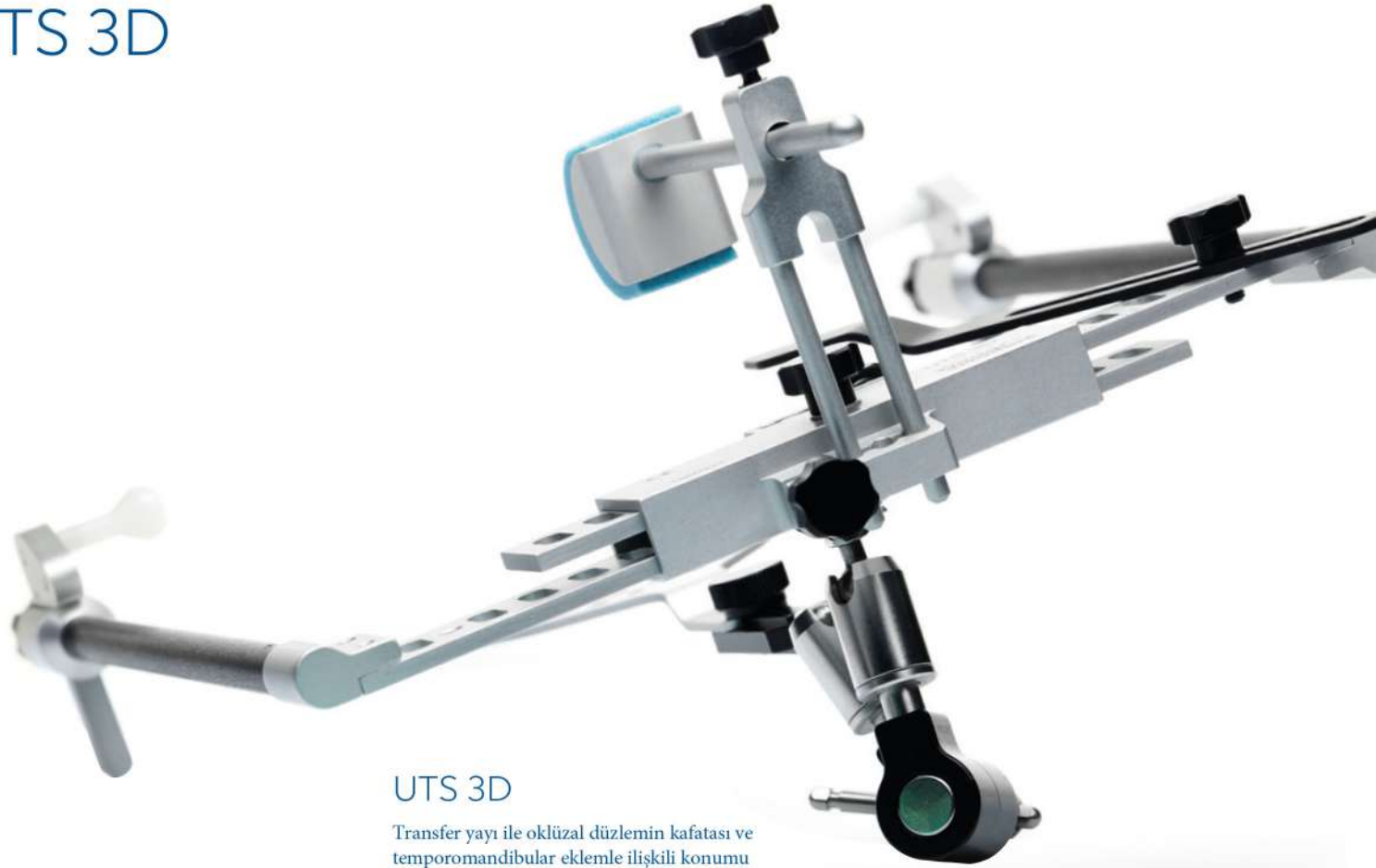

Stratos®

Her durum için doğru eklemler

Ortalama değerden tamamen kişiselleştirilmiş kadar, Stratos artikülörlerimiz size çok sayıda ayar seçeneği ve yerden tasarruf sağlayan bir tasarım sunar.

More than
56,000
articulators
in service ^[1]



Stratos® 300:

Mutlak esneklik

Bu artikülör tamamen ayarlanabilir özelliktedir. Zorlu ve karmaşık diş tedavileri için tasarlanmıştır.

Stratos® 100:

Sağlam ortalama değer

Bu, kullanımı kolay ve güvenilir bir ortalama değer hesaplayıcısıdır.

Stratos® aksesuarları

Stratos baz üniteleri, aksesuarlarımız kullanılarak bireysel ihtiyaç ve tercihlere göre uyarlanabilir:

Kişiselleştirilmiş aksesuar çeşitlerinden aksesuar seçimi

CE Kayıt Eklem Tutucu – Çeşitli Bileşen

Bu aksesuar ile laboratuvar, Camper Düzlemi'ne (CE) göre kişiselleştirilmiş modelin artikülöre aktarılması için yalnızca UTS 3D transfer yayının kayıt eklemine ihtiyaç duyar ve böylece tüm UTS'nin laboratuvara gönderilmesine gerek kalmaz.

FH Kayıt Eklem Tutucu – Tekli Aksesuar

Bu cihaz, Frankfurt Yatay (FH) düzlemine göre UTS 3D transfer yayının kayıt eklemine artikülöre aktarmak için tasarlanmıştır.

UTS Destek Pimi Tip II – Tekli Aksesuar

Bireysel modelin artikülöre aktarımı doğrudan komple transfer yayı ile gerçekleştiriliyorsa, bu pimler transfer yayını destekler.

Isırma Çatalı Desteği – Çeşitli Bileşen

Transfer yayının ısırma çatalını tutar ve model hizalaması sırasında ısırma çatalının düşmesini önler.

Eklem uçları – Stratos 200 için

Protrüzyon uçları: 15°, 20°, 25°, 35°, 40°, 45°, 60°

Bennett uçları: 15°

3B ayar şablonu – Tek aksesuar

UTS 3D transfer yayı ile birlikte, Spee ve Wilson eğrilerini dikkate alarak, bireysel olarak yönlendirilmiş modellerin doğru şekilde ayarlanması için.

Bireysel ön kılavuzluk plakası / kavisli kesici pim – Tek aksesuar

Bu aletlerle, lateral ön kılavuzluk açısı 0° ile 70° arasında sürekli olarak ayarlanabilir ve artikülör yüksekliği ayarlanabilir.

Orta fiyatlı aksesuar çeşitlerinden aksesuar seçimi

Yatay kılavuz – Çeşitli bileşen

Bonwill üçgenine göre dişli ve dişsiz modellerin ortalama değer hizalamasına olanak tanır.

2B yerleştirme şablonu – Çeşitli bileşen

Spee ve Wilson eğrilerini dikkate alarak, ortalama değer modellerinde doğru diş yerleştirme için.

2 ½ B yerleştirme şablonu – Tek aksesuar

Ortalama değerlere göre hizalanmış modellerde oklüzal düzlemin dorsal olarak yükseltilmesi seçeneğiyle ideal diş yerleştirme için.

[1] Based on sales figures

Protez diş çeşitlerimiz

Zamanın sınavından geçmiş kalite

Her bir hastanın özel ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli diş renkleri, şekilleri ve malzemeleri gereklidir.


Çünkü her vaka farklıdır ve yeni zorluklar sunar.

Kompozit ve PMMA malzemelerden üretilmiş geniş protez diş yelpazemizi keşfedin ve ilham alın.

Daha akıllıca sipariş verin

Ivoclar Diş Siparişi uygulaması, protez diş siparişlerinizi mümkün olan en kısa sürede vermenizi sağlar.

Görüntü yükleme özelliği, diş dolabınızdaki eksik setleri tespit eder ve sipariş edilmesi gereken öğelerin doğru bir listesini oluşturur.

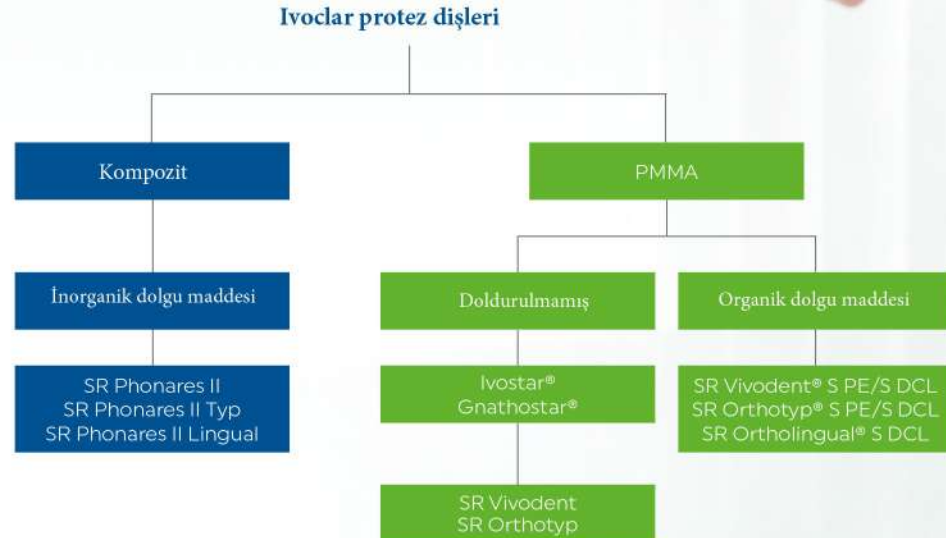

Our benchmark:
the
natural
tooth

SR Phonares II

Yüksek kaliteli kompozit malzemedan üretilmiş protez dişler

SR Phonares II kompozit dişinde dayanıklılığı ve estetiği bir araya getirdik. Bu sayede, çıkarılabilir protezlerde yüksek standartları kolaylıkla ve mükemmellekle karşılamanıza yardımcı oluyoruz.

The anterior tooth:

SR Phonares II

- ✓ Diş kalıpları, yaşa özgü özellikleri temel diş şekliyle birleştirmeye odaklanılarak tasarlanmıştır.
- ✓ Yumuşak veya kalın diş kalıpları arasındaki seçim, hastanın yüz şekline bağlıdır.
- ✓ Küçük, Orta, Büyük olmak üzere çeşitli boyut seçeneklerine göre kişiselleştirilmiş seçim.

The posterior teeth:

SR Phonares II Typ

- ✓ Klasik oklüzyon
- ✓ Dengeli temaslar, çukurda ve yanak tarafında destek
- ✓ İnterküspasyon: klasik diş-iki diş dizilimi



Mould concept



Dişin iç yapısı



Bir bakışta

SR Phonares II	
Anterior tooth moulds	18 upper anterior moulds 6 lower anterior moulds
Posterior tooth moulds	SR Phonares II Typ 3 maxillary sets 3 mandibular sets
Tooth shades	16 A-D shades 4 Bleach shades
Material	NHC composite

SR Vivodent® S PE / S DCL

Klasik bir eser, yeni bir yorumla.

SR Vivodent S PE / S DCL kalıpları, geniş bir şekil ve renk yelpazesi, canlı yüzey dokuları, doğal oranlar, forma özgü katmanlama ve fizyolojik eğrilik özellikleri sunarak etkileyici benzersiz estetik sonuçlar sağlar.

Ön diş:

SR Vivodent® S PE / S DCL

Kalıp konsepti

Küçük, Orta ve Büyük boyutlarda mevcut olan üç temel özellik,

insan doğal dişlerinin en yaygın şekillerini kapsayarak çeşitli kurulum seçeneklerine olanak tanır.



Bilmekte fayda var:

- ✓ Dişin her tarafında pürüzsüz, düzgün mine tabakası
- ✓ Yapısal unsurları örtmek için geniş diş boynu
- ✓ Doğal görünümlü beyaz estetik için anatomik diş arası kapanma

A variety of shades for more individuality:

- ✓ 20 özel PE tonu
- ✓ 16 A-D tonu
- ✓ 4 Ağartma tonu
- ✓ SR Nexco laboratuvar kompozitimizle bireysel karakterizasyon



The posterior teeth:

SR Orthotyp® S PE / S DCL

- ✓ Klasik oklüzyon
- ✓ Dengeli temaslara, çukurda ve yanak tarafında destek
- ✓ İnterküspasyon:
- ✓ klasik diş-iki diş dizilimi

SR Ortholingual® S DCL


- ✓ Dilisel oklüzyon
- ✓ Çukurda merkezileşmiş temaslara
- ✓ İnterküspasyon:
- ✓ Dişten dişe ve dişten iki diş yerleştirme teknikleri

Internal tooth structure

SR Vivodent S PE / S DCL



SR Orthotyp S PE / S DCL

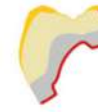

SR Ortholingual S DCL



Dentin core (DCL)
Facial incisal (DCL)

Cervical (DCL)
Back incisal (DCL)

At a glance

At a glance	SR Vivodent SPE		SR Vivodent SDCL	
Anterior tooth moulds	16 upper anterior moulds 8 lower anterior moulds			
Posterior tooth moulds	SR Orthotyp S PE 4 maxillary sets 4 mandibular sets	SR Orthotyp S DCL 4 maxillary sets 4 mandibular sets	SR Ortholingual S DCL 3 maxillary sets 3 mandibular sets	
Tooth shades	20 PE shades	16 A-D shades 4 Bleach shades		
Material	Highly cross-linked DCL			



**“SR Vivodent® S PE diş
protezi serisi,
doğayla gerçek uyumun eş
anlamlısıdır.”**

Giovane Junckes
Brazil

SR Vivodent

Zamansız bir klasik

SR Vivodent ve SR Orthotyp, popüler klasik kalıplarımız, laboratuvarınızda kombine protezler için güçlü bir ekip oluşturuyor.




Kalıp konsepti

Ön diş kalıpları genel olarak üçgen, oval ve kare şekillere ayrılır. Ayrıca, Yumuşak ve Kalın tasarımlar olarak da sınıflandırılırlar. Bununla birlikte, her diş kalıbının, aynı kategorideki diğerlerinden ayırt edici kılan kendine özgü özellikleri vardır.

Dişin iç yapısı

SR Vivodent SR Orthotyp

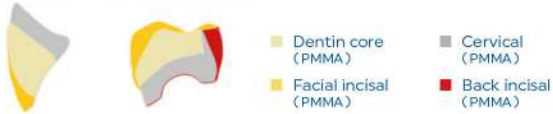

At a glance

	SR Vivodent	SR Orthotyp
Anterior tooth moulds	20 upper anterior moulds 8 lower anterior moulds	-
Posterior tooth moulds	-	5 maxillary sets 5 mandibular sets
Tooth shades	16 A-D shades 4 Bleach shades 20 Chromascop shades	
Material	Cross-linked PMMA	

Ivostar®

basitçe iyi

Ivostar ve Gnathostar, tasarımları basit olmasına rağmen son derece etkilidir.




Kalıp konsepti

Esasen, diş kalıbı tasarımı, hastalarda bulunan üst ön diş şekillerine göre üç tip kalıbı birbirinden ayırır: üçgen - oval - kare.

Dişin iç yapısı

Ivostar Gnathostar

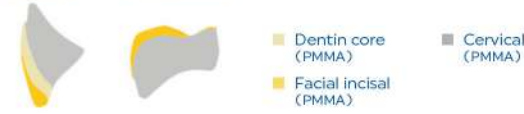

At a glance

	Ivostar	Gnathostar
Anterior tooth moulds	15 upper anterior moulds 6 lower anterior moulds	-
Posterior tooth moulds	-	5 maxillary sets 5 mandibular sets
Tooth shades	16 A-D shades 4 Bleach shades 20 Chromascop shades	
Material	Cross-linked PMMA	

Protez tabanımız malzemeler

Köklü ve kapsamlı: dökme, dolgu ve enjeksiyon teknikleri için geniş bir protez taban malzemesi seçeneği, kendiliğinden sertleşen ve ısı ile sertleşen uygulamalar.

IvoBase®

Yüksek kaliteli protez taban malzememiz, IvoBase® Enjektör ile birlikte enjeksiyon tekniği için tasarlanmıştır. Malzeme önceden dozlanmış halde gelir, kendiliğinden sertleşir ve iki kalite sınıfında mevcuttur.

ProBase®

Dökme ve sıkıştırma tekniği için geniş bir renk yelpazesinde bulunan geleneksel protez taban malzemesi.

SR Ivocap®

Enjeksiyon tekniği için orijinal protez taban malzemesi.

Ayrıca IvoBase® Enjektörde de işlenebilir – önceden dozlanmış, ısı ile sertleşen, iki farklı kalite sınıfında mevcuttur.

SR Triplex®

Kaliteli bir protez tabanı malzemesi.



“IvoBase® sistemi ile tam protez uygulamalarında en yüksek performansı elde edebiliyorum.”
Renata Vano, Brezilya



IvoBase® System

Tek tuşla hassasiyet

Tamamen otomatik enjeksiyon cihazı ve yüksek kaliteli kendiliğinden sertleşen protez taban malzemesinden oluşan mükemmel uyumlu bir sistem.

Bu, hassas protez uygulamaları için çözümünüzdür.

IvoBase® Injector

TReçinenin kimyasal büzülmesi, enjektör içindeki kürleme işlemi sırasında tamamen telafi edilir.

At a glance

IvoBase Injector

Faydalar	- Kontrollü büzülme telafisi - Kompakt ve buharsız - Su veya basınçlı hava bağlantısına gerek yok - Artık monomer içeriğini belirgin şekilde azaltan RMR fonksiyonu - Kolay temizlenir - Sağlam ve dayanıklı
Aksesuarlar	Mufla - Hemen hemen tüm model boyutlarına uygun evrensel şekil - Kolay ve rahat kullanım - Kilitli tokalı mataralar Isı koruma eldivenleri Kızılötesi termometre - Doğru, temassız sıcaklık ölçümleri - Güvenilir kalite kontrolü

Temiz – Güvenilir – Yenilikçi

Good to know

- ✓ Önceden dozlanmış kapsüller sayesinde optimum karıştırma oranı
- ✓ Büzülme telafisi sayesinde yüksek uyum hassasiyeti
- ✓ RMR fonksiyonu ile %1'den az çok düşük artık monomer içeriği
- ✓ Parlak taban yüzeyleri

IvoBase® Hybrid and IvoBase® High Impact

Özel bir formülasyon, ısı ile sertleşen polimerin avantajlarını, kendiliğinden sertleşen polimerin kolay kullanım özellikleriyle birleştiriyor. Bu gelişme, protez taban malzemelerinde yeni bir kategori oluşturuyor.



At a glance

IvoBase Hybrid

IvoBase High Impact

Polymerization time	35 minutes	50 minutes
Shades	Pink Pink-V Preference Clear	Pink Pink-V Preference
Shades with enhanced opacity	Pink-V Implant Preference Implant	Pink-V Implant Preference Implant 34-V
Material	PMMA	

ProBase® Hot & Cold

Profesyonel PMMA protez taban malzemeleri

ProBase, geleneksel dökme ve paketlenme tekniklerindeki uzun yıllara dayanan deneyimin sonucudur. Malzeme, hoş işleme özelliklerine sahiptir ve geniş bir renk yelpazesinde mevcuttur.



ProBase®
Hot

- ✓ Isıyla sertleşen protez tabanı geleneksel dolgu tekniği için malzeme
- ✓ Pürüzsüz kıvam
- ✓ Üç farklı polimerizasyon yöntemi
- ✓ Dökme ve dolgu tekniği ile kullanım için kendiliğinden sertleşen protez tabanı malzemesi
- ✓ Mükemmel akış ve kalıplama özellikleri
- ✓ Artırılmış maskeleye etkisine sahip ek renk tonları

ProBase®
Cold

At a glance

	ProBase Hot	ProBase Cold
Processing technique	Packing technique	Packing technique Pouring technique
Shades	Clear Pink Pink-V S US-L US-P 36 P-V	Clear Pink Pink-V S US-D US-L US-P 36 P-V Preference
Shades with enhanced opacity	Pink-V Implant	Pink-V Implant
Material	PMMA	

SR Triplex® Hot & Cold

PMMA protez tabanı malzemeleri

SR Triplex, kolay kullanım özellikleri ve rahat işlem süreleri sunar.



SR Triplex®
Hot

- ✓ 20 dakika çalışma süresi
- ✓ Kullanımı kolay
- ✓ ProBase ve SR Ivocap ile uyumlu renk tonları
- ✓ Akış aşaması: yaklaşık 2 ila 3 dakika
- ✓ 5 ila 6 dakikalık bir geçiş aşamasından sonra, malzeme şeklini koruyacak kadar sertleşir ve 3 dakika daha şekillendirilebilir.
- ✓ ProBase ve SR Ivocap ile uyumlu renk tonları

SR Triplex®
Cold

At a glance

	SR Triplex Hot	SR Triplex Cold
Processing technique	Packing technique	Pouring technique
Shades	Pink Pink-V	Pink Pink-V 36 P-V
Material	PMMA	

SR Ivocap®

Enjeksiyon tekniği için ısı ile sertleşen PMMA protez taban malzemesi

For decades, thousands of laboratories have been using SR Ivocap successfully. Similarly, thousands of people around the world appreciate the comfort and precise fit of the dentures made with it.



Bunu bilmek güzel.

- ✓ Önceden dozlanmış kapsüller sayesinde optimum karıştırma oranı
- ✓ Büzülme telafisi sayesinde yüksek uyum hassasiyeti
- ✓ Cap Vibrator'da kolay karıştırma
- ✓ IvoBase Enjektör'de enjeksiyon ve kürleme işlemi için de uygundur

SR Ivocap®
High Impact

SR Ivocap®
Clear

- ✓ Darbelere ve kırılmalara karşı son derece dayanıklı.
- ✓ Isı-basınç polimerizasyonu
- ✓ Geniş renk seçeneği
- ✓ Şeffaf
- ✓ Isı-basınç polimerizasyonu
- ✓ Sert diş koruyucuları için uygundur

At a glance

SR Ivocap High Impact

SR Ivocap Clear

Polymerization time	35 minutes	50 minutes
Shades	Pink Pink-V US-L US-P US-D S Preference Preference Implant Pink-V Implant	Clear
Shades with enhanced opacity	Pink-V Implant Preference Implant	Pink-V Implant Preference Implant 34-V
Material	Shock resistant PMMA	PMMA

SR Nexco®

Işıkla sertleşen kompozit

SR Nexco macunlarının ışık-optik özellikleri ve geniş ürün yelpazesi, laboratuvarındaki günlük işleri kolaylaştırır. Kompozit malzemeler çok yönlü uygulamalara sahiptir ve yaratıcı özgürlüğün tadını çıkarmanıza olanak tanır.



Bunu bilmek güzel.

- ✓ Mikro-opal dolgular sayesinde tutarlı renk tonu etkisi
- ✓ Opalesans, floresans ve saydamlık, doğal dişlerin dinamik ışık etkilerine karşılık gelir [1]
- ✓ Piyasada bulunan birçok ışıkla sertleştirme cihazıyla tamamen ve güvenilir bir şekilde ışıkla sertleştirilebilir [2]

Pembe ve beyaz estetik

SR Nexco serisi, diş eti dokusunun kişiselleştirilmiş protez rekonstrüksiyonu için geniş bir diş eti tonu yelpazesi sunmaktadır.

Protez dişler ve protez taban malzemeleri, küçük değişiklikler ve özel karakterizasyonlar uygulanarak gerçeğe yakın özellikler ve bireysellik kazandırılabilir.

Diş renkleri

Opalasan ve floresan özellikleri doğal dişinkine çok yakındır.

Farklı restorasyonlarda ve değişen ışık koşullarında uyumlu bir renk eşleşmesi elde edilir.

[1] Doğal ışık koşullarında; yapay olarak üretilen UV veya yakın UV ışığı farklı bir izlenime neden olabilir.

[2] 380 ila 510 nm arasında geniş bir ışık yayılım spektrumu ile

At a glance

SR Nexco

Compatibility	- Alaşımlar - Titanyum ve titanyum alaşımları - Zirkonyum oksit - Protez dişleri ve protez taban malzemeleri gibi PMMA bazlı malzemeler - Telio CAD gibi çapraz bağlı PMMA malzemeleri
Material	Işıklı sertleşen kompozit
Areas of application	- Sabit protezler - İskelet destekli - İskeletsiz - Protez dişlerinin modifikasyonu ve karakterizasyonu - Protez taban malzemelerinin modifikasyonu ve karakterizasyonu - Telio CAD

Ivotion® Protez Sistemi ile Dijital Üretim

BPS® dijitalleşiyor

For dental laboratories

- ✓ Dijital üretim:
 - Ivotion ile monolitik işlem veya kanıtlanmış Ivoclar büyük boyutlu işlem
- ✓ Hızlı ve kolay dijitalleştirme
- ✓ PrograScan ve 3Shape laboratuvar tarayıcıları ile exocad DentalCAD yazılımı veya 3Shape Dental System™ kullanılarak ekranda kolay ve sezgisel protez tasarımı

For dental practices

- ✓ Tedavilerin planlanması ve uygulanmasında yüksek düzeyde kesinlik ve güven
- ✓ Doğru ve öngörülebilir sonuçlar için kapsamlı veri tabanı
- ✓ Zaman kazandıran ve rutine entegre edilmiş uygulama



1

Milling of the denture base made of Ivotion Base, the proven denture base material.



2

Milling of the dental arch using Ivotion Dent or Ivotion Dent Multi, tooth-coloured discs made from DCL material.



3

Bonding of the denture base with the tooth arch using Ivotion Bond to ensure a strong bond.



4

Fine milling of the denture for high-precision results. Excess bonding material or errors in the cementation of the teeth are corrected.



5

Polishing of the digitally manufactured denture to achieve an optimum esthetic result.

Monolithic Process with Ivotion®



İnanılmaz verimliliğin sırrı
Tam protez tasarlandıktan sonra, monolitik restorasyon, PrograMill freze makinesinde kesintisiz bir frezeleme işlemiyle hızla frezelenir. Frezelenmiş protezin sadece cilalanması gerekir.

- ✓ Diş ve protez taban malzemelerini birleştirir.
- ✓ Eşsiz kabuk geometrisi, diş etinden dişe geçişi tanımlar. Zaman alan manuel üretim adımları içermez.

- ✓ Ivotion Dent Multi'nin uyumlu renk geçişi sayesinde yüksek estetik
- ✓ Mükemmel oklüzal uyum
- ✓ Daha fazla esneklik, örneğin çok geniş diş kemerleri için

Büyük Ivotion Taban ve Boy Ivotion Dent (Çoklu) İşlem
İki disk içeren üretim süreci olağanüstü bireysellik ve esneklik ile karakterize edilir. En zorlu vakaların bile üstesinden gelmenizi sağlar.